



# Gastrolyzer+™ H<sub>2</sub> Atemtest

## VERBRAUCHSMATERIAL



### D-Stücke oval

Das D-Stück beinhaltet ein Einweg-Ventil, damit keine Luft aus dem Gerät eingeatmet werden kann. Zusätzlich ist ein Bakterienfilter eingebaut mit einer Kreuz-Kontaminationsreduktion von >99.9%. Damit wird zusätzlich das Gerät vor Kontamination geschützt. Passend dazu SteriBreath Einweg Mundstücke.



### SteriBreath Einweg Mundstücke

Zur Verwendung mit allen Bedfont Produkten mit ovalen D-Stücken. Die neuen Steribreath Mundstücke sind aus Kunststoff und einzeln hygienisch verpackt. Dadurch können sie innen in das D-Stück gesteckt werden ohne vorher direkt berührt werden zu müssen. Eine eindeutige Verbesserung aus Sicht der Hygiene.



### Einweg D-Stück transparent

Das OneBreath™ -Mundstück ist ein Einweg-Bakterienfiltermundstück und kann direkt am Gerät angebracht werden, um einen Atemtest durchzuführen. Das OneBreath™ enthält ein Einwegventil und einen Bakterienfilter, der nachweislich >99,9% der in der Luft befindlichen Bakterien entfernt.

D-STÜCK-OVAL

VE 12 Stück

STERIBREATH

VE 250 Stück

D-STÜCK-250

VE 250 Stück



### Kalibrierungsgase

Kalibrations-Kit (Flasche mit Druckminderer und Schlauch)

KALKIT100H2

VE 1 Stück

Ersatzflasche 100ppm

H2KAL100PPM

VE 1 Stück




### Gerätereinigungstücher „Wipe“ - alkoholfrei

Alkohol- und chlorfreies Geräte- und Händereinigungstuch speziell für die Verwendung mit Bedfont Atemtestgeräten. Alkohol oder Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten, sollten niemals verwendet werden, da sie den Sensor im Gerät schädigen können und die Messungen/Geräte beeinflussen.

WIPE

VE 100 Stück

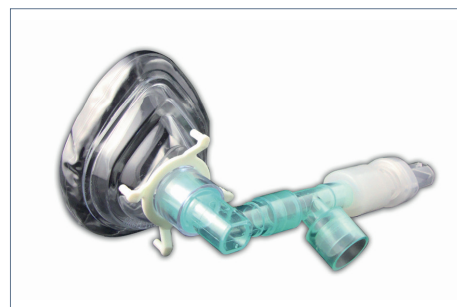

### Atemmasken Set inkl. Ansatzstück

Zur Verwendung mit Gastrolyzer und ToxCO bei Kindern oder bewusstlosen erwachsenen Patienten. Set bestehend aus Sampling System und je einer Maske für Säuglinge, Kleinkinder und Erwachsene.

BEDFONT-MASK

VE 1Stück